

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИМПУЛЬС

МАССАЖНО - ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Благодарим Вас за приобретение прибора для электроволнового массажа "ИМПУЛЬС"!

Просьба: внимательно изучите данную инструкцию для безопасного использования прибора "ИМПУЛЬС".
Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования прибора "ИМПУЛЬС".

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Введение	-----	4
Спецификация	-----	7
Меры предосторожности	-----	8
Устранение неисправностей	-----	9
Использование клавиш	-----	10
Уход за пластинами	-----	11
Использование электродов	-----	12
Использование массажных пластин	-----	13
Гарантийный талон	-----	18

ВВЕДЕНИЕ

Многофункциональный
прибор для электроволнового массажа

«ИМПУЛЬС»

Улучшает кровообращение, лимфоток, способствует повышению эластичности и упругости кожи, стимулирует функции кожных желез, улучшает моторику желудка и кишечника, проводит профилактику солевых и других патологий.

Массаж оказывает общеукрепляющее воздействие на мышечную систему. Под его воздействием нормализуется тонус и эластичные свойства мышц, улучшаются их сократительные функции, возрастает работоспособность. Активация кровоснабжения массируемых мышц приводит к улучшению их питания и препятствует развитию в них атрофических процессов, что имеет особое значение при параличах.

Благотворно массажные воздействия сказываются на суставно-сумочном аппарате. Под их влиянием увеличивается эластичность и подвижность связочного аппарата, рассасываются отеки, выпоты и другие патологические отложения в суставах, уменьшается болевой синдром ревматического и неврологического характера.

ВВЕДЕНИЕ

Массаж положительно влияет на сердечно – сосудистую систему, облегчает работу сердца, улучшает кровоснабжение и сократительную способность сердечной мышцы, устраняет застойные явления в большом и малом кругах кровообращения, усиливает обмен веществ и поглощение тканями кислорода. Массаж стимулирует кроветворение и транспортную функцию эритроцитов.

Многофункциональный прибор для электроволнового массажа «ИМПУЛЬС» зарекомендовал себя как неотъемлемый помощник различным слоям населения, вне зависимости от возраста, страдающим от различных недугов. При использовании «ИМПУЛЬСА» возможно облегчение артритных, артрозных, суставных и других видов болей. Применение «ИМПУЛЬСА» эффективно при гипертонических кризах, сахарном диабете, остеохондрозе, нарушении кровообращения, нарушении работы мочеполовой системы.

«ИМПУЛЬС» производит стимуляцию, а соответственно улучшение обменных процессов в мышечных тканях. Что очень эффективно при реабилитации после инсульта.

Благодаря современным технологиям, таким как электроволновой массаж и точечная терапия, которые входят в основные функции «ИМПУЛЬСА», в сочетании с лекарственными средствами ускоряется процесс восстановления и улучшения функций организма.

ВВЕДЕНИЕ

Кроме всего прочего благодаря этим новейшим технологиям, при использовании «ИМПУЛЬСА» из организма выводятся токсические вещества, что в дальнейшем приводит к омоложению клеток и оздоровлению организма. Частоты, используемые в приборе, входят в резонанс со всеми жизненно необходимыми органами и регенерируют наше тело, а соответственно помогают существенно снизить риск побочных действий от применения химических препаратов и сэкономить время и финансы семьи на лечении.

Оборудование «ИМПУЛЬС» соответствует европейским стандартам. Является неотъемлемым помощником в домашнем применении.

Особым преимуществом «ИМПУЛЬСА» является простота и безопасность в использовании и надежность в применении.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	ИМПУЛЬС
Модель	AST - 803C
Источник питания	3 элемента питания 1,5V типа AA
Потребляемый ток	500 мА
Мощность	3 W
Рабочая температура; влажность	+15 - +30 C ⁰
	отн. влажность 30 - 85%
Температура и влажность хранения	+0 - +50 C ⁰
	отн. влажность до 90%

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Процессор	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Аппликационные пластины	2 шт.
Джок - электроды	1 пара
Элементы питания	3 шт.
Электродный шнур	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно изучите данное руководство перед началом использования прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использование телефона при работе прибора;
- использование прибора при наличии кардиостимулятора, злокачественной опухоли, порока сердца, при запущенной форме варикоза, при наличии медицинских противопоказаний либо беременности;
- использование прибора детьми без присутствия взрослых;
- использование прибора в местах с повышенной влажностью;
- допускать контакт пластин с металлическими предметами на теле во время использования (часы, ювелирные украшения).
- производить самостоятельную разборку прибора.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- использование прибора близко к сердцу, в непосредственной близости к очагам инфекций на коже;
- перемещение пластин на другую часть тела при включенном приборе;
- использование прибора за рулем автомобиля.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Неисправность	Причины	Устранение
Прибор не включается	Не соблюдена полярность установки элементов питания	Установите элементы питания, соблюдая полярность
Преждевременное отключение прибора	Массажные пластины наложены не плотно	Наложите плотно пластины на поверхность кожи
	Низкий уровень заряда элементов питания	Замените элементы питания
	Неисправен электродный шнур	Замените электродный шнур
Массажная пластина не фиксируется на поверхности кожи	Не снята защитная пленка	Удалите пленку с поверхности пластины
	Пластины наложены на влажную кожу	Оботрите тело полотенцем
	Поврежден верхний слой пластины	Замените пластину
Слабая стимуляция	Пластины установлены не плотно	Установите пластины правильно
	Пластины перекрывают друг друга	Наложите пластины правильно
	Плохой контакт в месте подсоединения электродного шнура к пластине	Обеспечьте хорошее подсоединение электродного шнура
	Недостаточная интенсивность	Увеличьте интенсивность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИШ



1. ВКЛ/ВЫКЛ
 2. выбор процедуры - поглаживание
 3. выбор процедуры - растирание
 4. выбор процедуры - массажирование
 5. выбор процедуры - постукивание
 6. выбор скорости процедуры
 7. процедура для плечевого пояса
 8. процедура для поясничного отдела
 9. процедура для суставов
 10. процедура для ступней и кистей
 11. процедура для бёдер, коленей и ног
 12. повтор
- MIN - таймер времени процедуры
 speed - указатель скорости процедуры

УХОД ЗА ПЛАСТИНАМИ

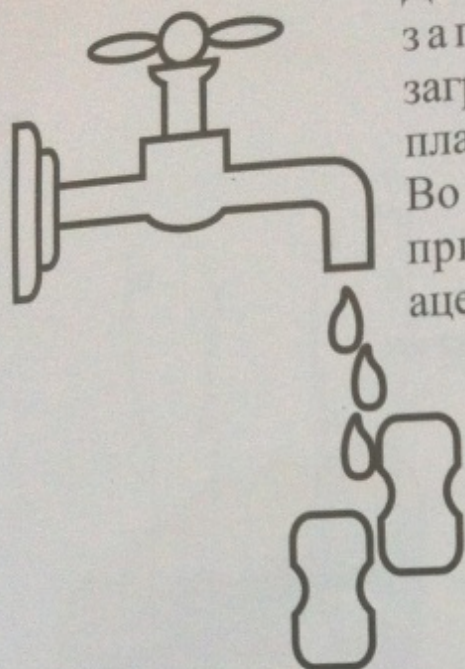


Для очистки массажных пластин от загрязнений, необходимо удалять загрязнения один раз в десять дней, промывая пластины чистой теплой водой. Во избежание повреждений запрещается применять химические средства (спирт, ацетон, растворители и т. п.)

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Прибор электромассажный следует хранить и эксплуатировать при температуре окружающей среды от $+0$ до $+50$ градусов $^{\circ}\text{C}$, с относительной влажностью воздуха не более 90%. В процессе хранения и эксплуатации допускается периодическая чистка с помощью слегка влажного кусочка ткани.

Пожалуйста, аккуратно храните электромассажный прибор в коробке!


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЖОК-ЭЛЕКТРОДОВ

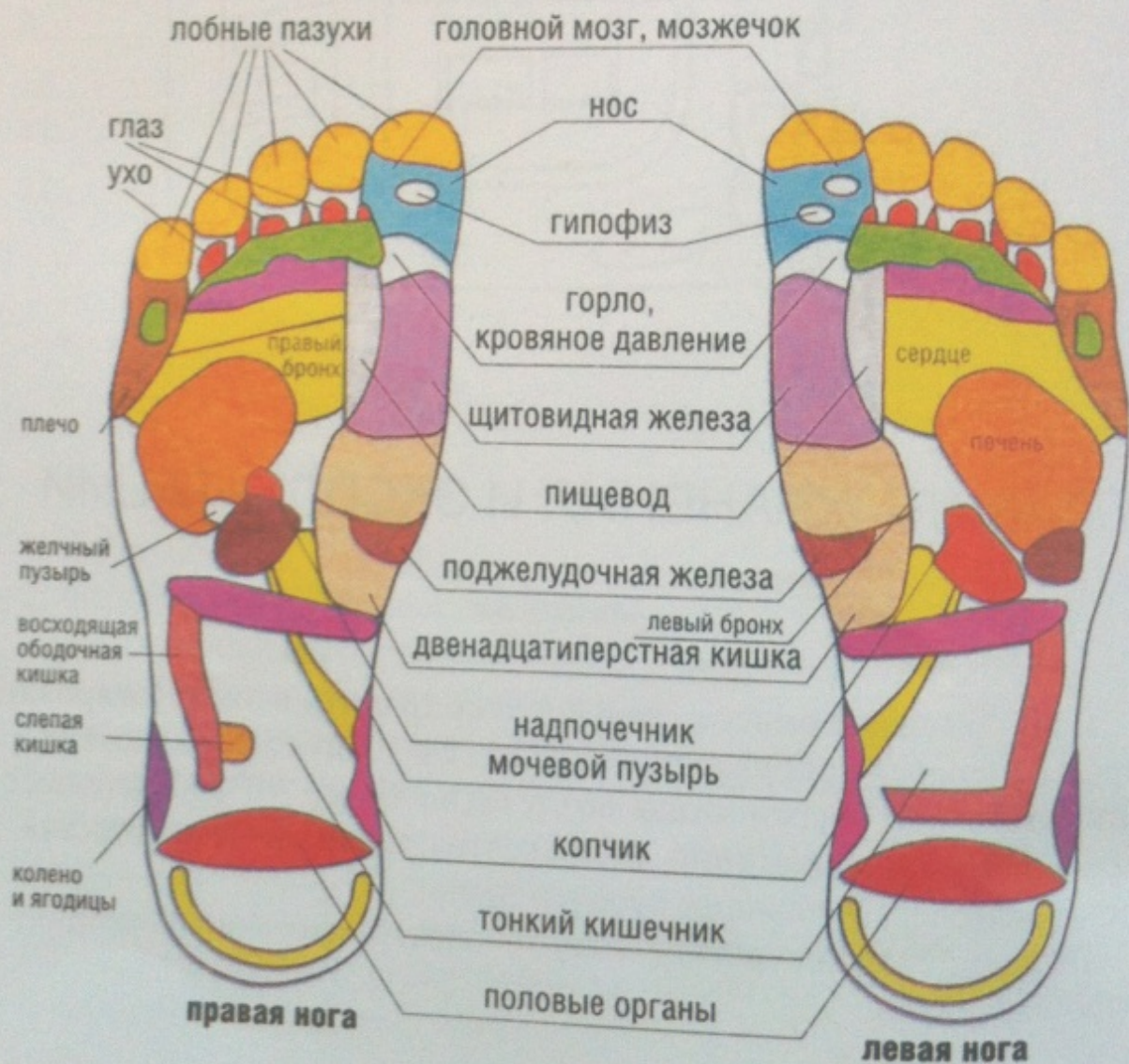

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИН

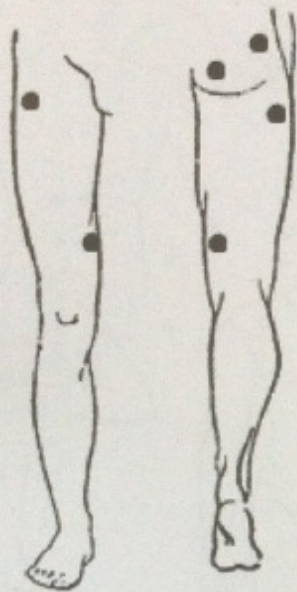


Уменьшение целлюлитных
отложений

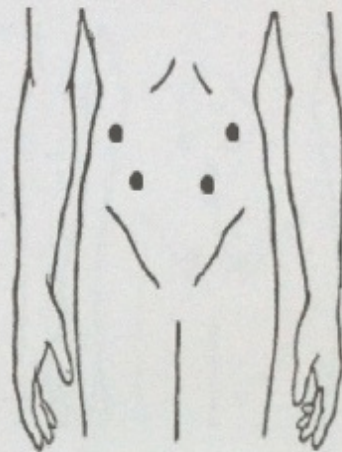

Уменьшение жировых
отложений




Снятие симптомов
при гайморите

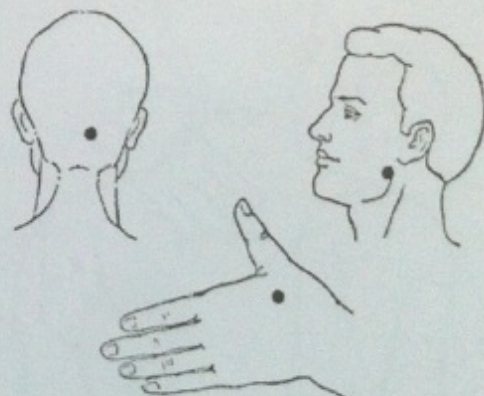


Снятие зубной боли


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИН

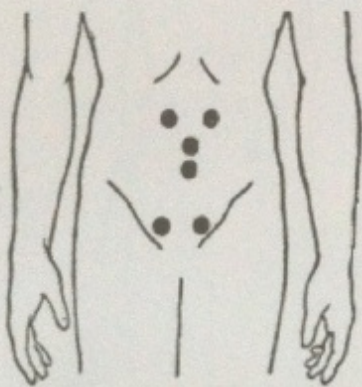


Облегчение ПМС

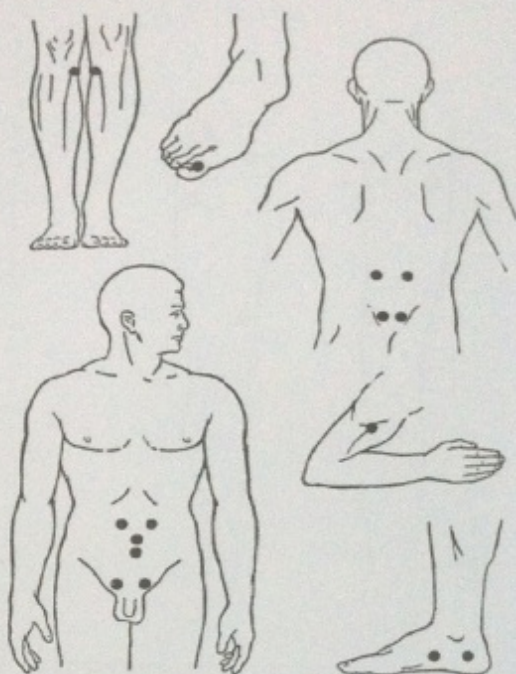

Половая дисфункция

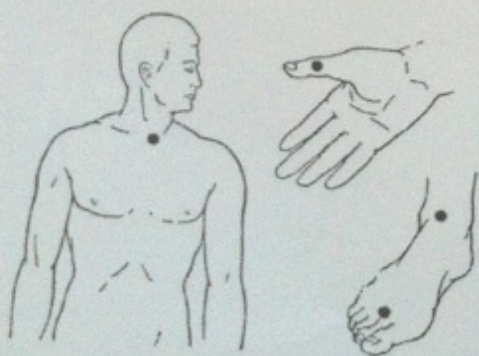


Ангина

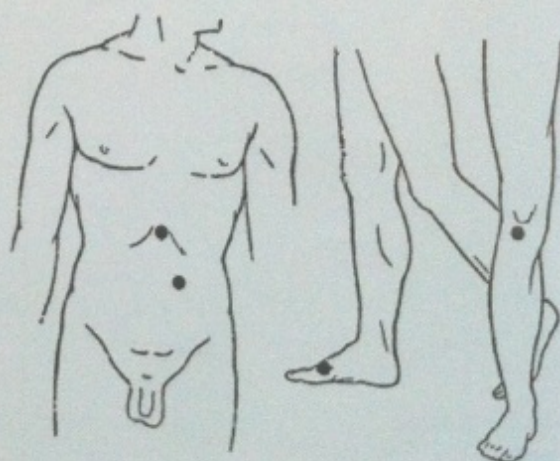


Расстройство кишечника


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИН

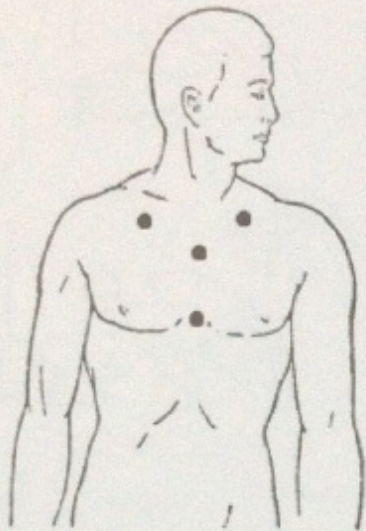


Бронхиальная астма

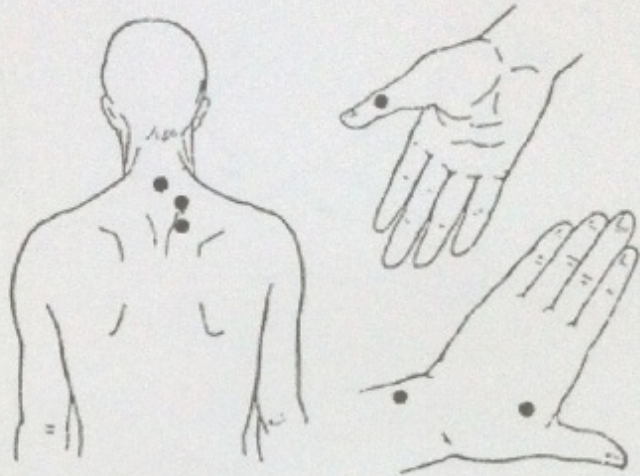

Симптомы гриппа

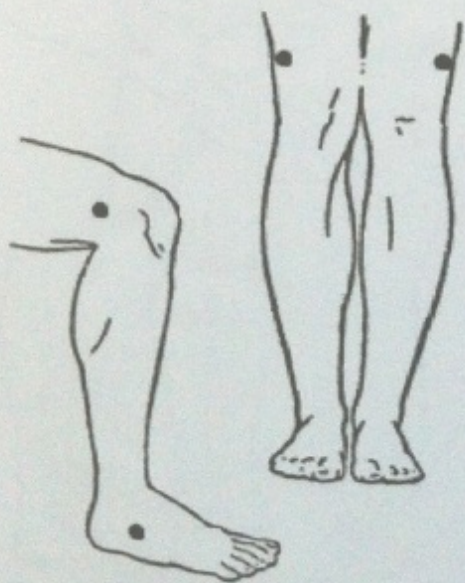


Сахарный диабет

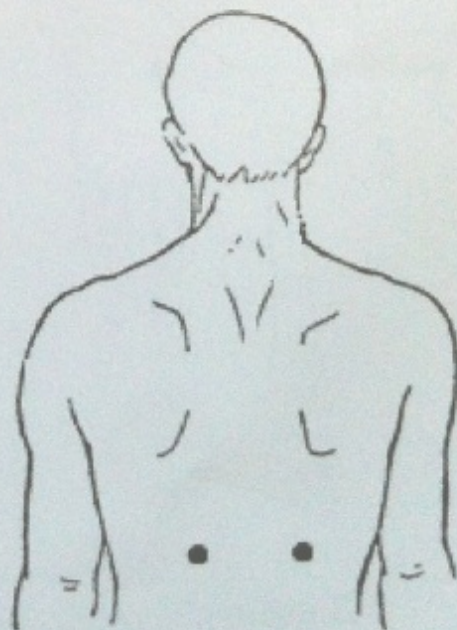


Бессонница



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИН

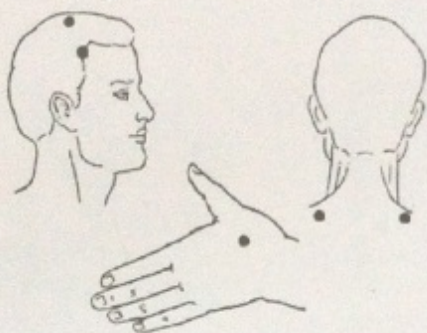

Снятие головных болей

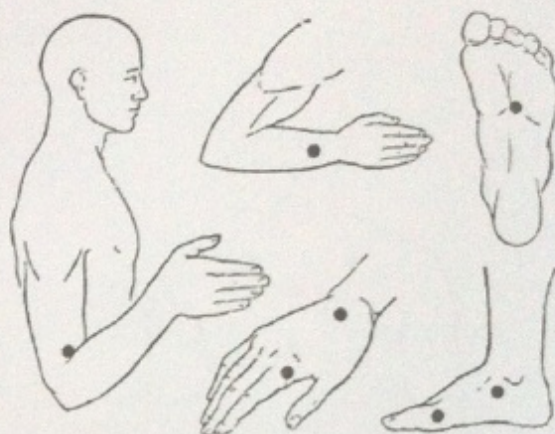


При запорах

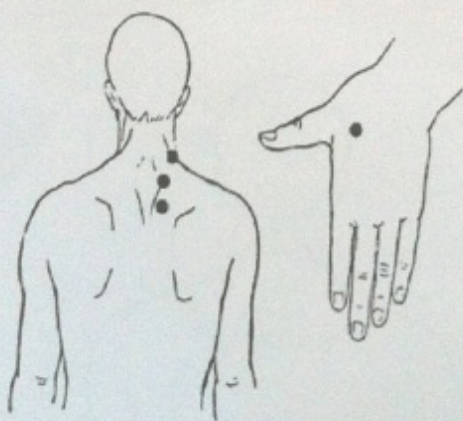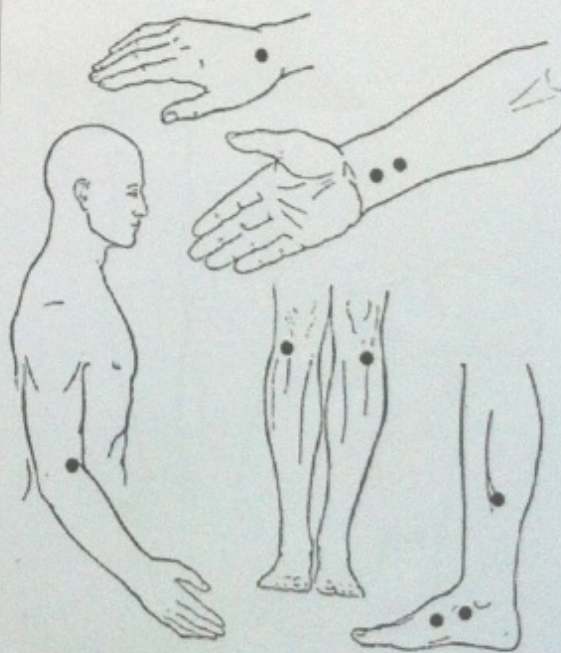
Плексит
(снятие болей в плечах)

Атеросклероз


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИН

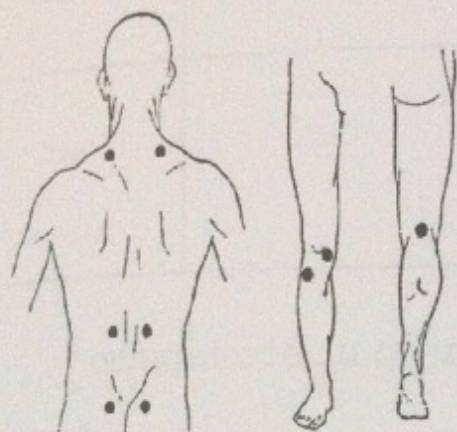


Остеохондроз
(люмбаго, радикулит)

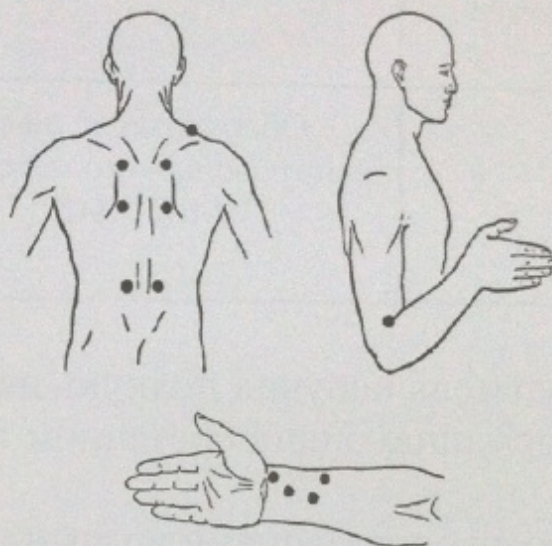

Понижение кровяного
давления

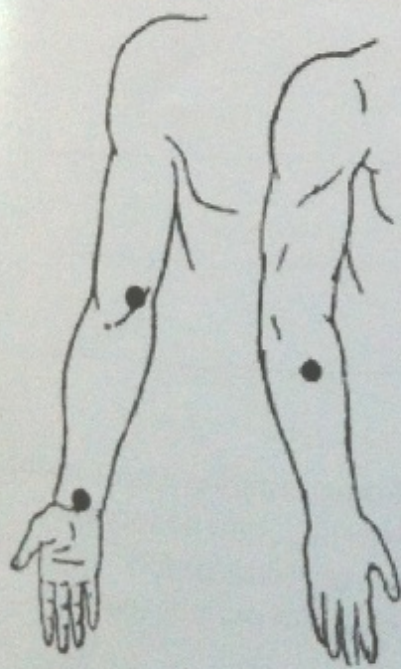

Обезболивание
локтевых суставов

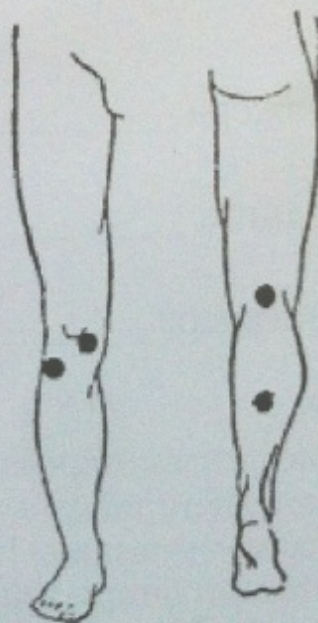

Обезболивание
коленных суставов

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	Наименование оборудования	Количество	Срок гарантии
	Оборудование для электроволнового массажа "ИМПУЛЬС"	1 шт	12 мес.

Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информацию о приобретенном товаре.

С противопоказаниями и гарантийными обязательствами ознакомлен:

_____ / _____
(подпись владельца) (дата приобретения)

Ф.И.О. менеджера _____

Тел. организации: _____

Подпись менеджера _____

Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет право на ремонт приобретенного товара в течение срока гарантии, если недостатки товара не вызваны нарушением Покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действиями третьих лиц или непреодолимой силы.

В связи с постановлением правительства РФ № 81 от 06.02.2002 г. данный электробытовой прибор индивидуального пользования надлежащего качества входит в перечень непродовольственных товаров, не подлежащих возврату.